

STS-M100 semi-automatic specific protein analyzer


STS-M100半自动特定蛋白分析仪



高稳定

高性能

尺寸紧凑

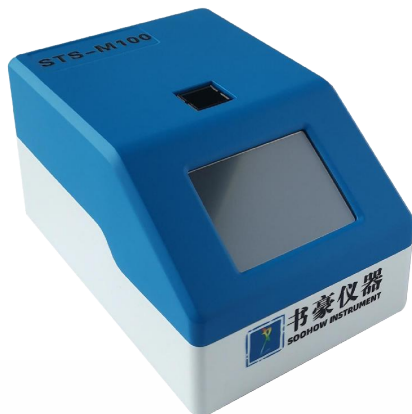

书豪仪器 助力中国高端制造
SOOHOW INSTRUMENT SUPPORT
HIGH-END MANUFACTURING IN CHINA
SOOHOW

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

性能特点

- 精密度：精密度以变异系数CV表示，要求 $\leq 5\%$ 。
- 准确度：准确度以测试平均值与标示值的偏差（B）表示，要求 $\leq \pm 5\%$ 。
- 仪器稳定性：开机4小时、8小时后，平均值与标示值的偏差（B）表示，要求 $\leq \pm 5\%$ 。
- 环境试验要求：符合GB/T 14710-2009中气候环境试验I组，机械环境试验I组及本技术要求中表3的规定的要求。分析仪的运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中第4、5章的要求。
- 安全要求：符合GB 4793.1-2007、GB 4793.9-2013和YY0648-2008中适用条款的要求。
- 电磁兼容要求：符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010中适用条款的要求。

APPLICATION FIELD

应用领域



医院



卫生院



实验室



动物医院

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

项目	数据
仪器尺寸	不大于150mm*100mm*70mm
分析方法	速率散射比浊法
光学系统	单一波长半导体光源，波长为650nm，一次性使用有机玻璃比色杯。
试剂	分析仪配套专用试剂
反应位	反应杯位1个
加样方式	手动加样
数据处理	测试结果存储监测、结果查询、结果打印，具备4G以上联网和WIFI功能，可上传下载信息，远程升级和维护
测量通道	1个通道
温控及搅拌	自动温控、自动搅拌。
检测步骤	和预分装试剂配套使用，检测步骤简单，只需一步，结果立等可取
操作软件	采用实时多任务操作系统，中文操作语，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制，操作简单
标配存储	可储存两万组测试数据
外接设备	蓝牙打印机